



age**LOC**TM
*boost*TM
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM	3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK	4
HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT	6
AZ AGELOC BOOST KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE	6
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	8
AZ AGELOC BOOST KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA	12
PROBLÉMAMEGOLDÁS	13
A KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉSE	13
KARBANTARTÁS	14
A CSERE ÉS A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI	15
SZABADALMAK	15
SZIMBÓLUMOK MEGHATÁROZÁSAI	15

TARTALOM


- 1 db ageLOC Boost készülék
 - 1 db Rövid használati útmutató
 - 1 db mágneses töltő
 - 1 db védőborítás a kezelőfelület számára
- Az ageLOC Boost készülékkel használatos ageLOC Boost Activating Serum külön kapható.

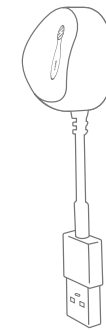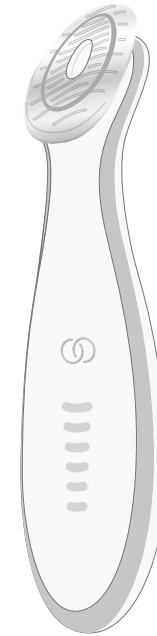






BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az ageLOC Boost készüléket, valamint a mágneses töltőt 4000 méteres magasságnak megfelelő nyomásra tesztelték.

A készülék olyan akkumulátort tartalmaz, mely nem cserélhető.

 **FIGYELMEZTETÉS:** az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez biztosított mágneses töltő használható.

-  Az ageLOC Boost készülék kizárólag egészséges bőrön használható. Ne használd, ha bőrdön gyulladás vagy nyílt seb található, rosaceára hajlamos, fémallergiás vagy problémás, illetve ha rendkívül érzékeny. A használatot megelőzően egyeztess háziorvosoddal, ha terhes vagy, pacemakert vagy hasonló készüléket használsz, epilepsziás vagy, fém fogszabályzót viselsz, vagy fémbetűtést viselsz, illetve akkor is, ha épp nem vagy egészséges.
-  Az ageLOC Boost készüléket felnőttek számára fejlesztettük ki. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek, valamint 16 éven felüli gyermekek kizárólag felügyelet alatt, a készülék biztonságos használatára vonatkozó iránymutatás mellett és az esetleges veszélyek tudatában használhatják a készüléket. Gyermekek elől elzárva tartandó. Győződj meg róla, hogy gyermekek nem játszanak a készülékkel. A készülék tisztítása és karbantartása gyermekek számára nem engedélyezett.
-  Ne használd közvetlenül az ajkakon, a szemén vagy szemhéjon. A készülék és az Activating Serum kizárólag külső használatra készült. Amennyiben bőrdön duzzadás, hosszan tartó kipirosodás vagy abnormális irritáció jelentkezik, azonnal hagyj abba a készülék használatát, és szükség esetén fordulj orvoshoz. Az ageLOC Boost első használata előtt, valamint, ha érzékeny vagy allergiára hajlamos a bőrdön, az utasításoknak megfelelően egy kis bőrterületen mindig teszteld a készüléket.
-  Az áramütés, égés, tűz és sérülések elkerülése végett ne merítsd teljesen víz alá az ageLOC Boost készüléket. Ne helyezd el vagy tárold olyan helyen, ahonnan beleeshet vagy bárki belelökheti a kádba, a zuhanyfülkébe, a mosdóba vagy a vécébe.

-  Időnként ellenőrizd, hogy a készülék nem sérült-e; a személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne működtesd a készüléket, ha az megrongálódott vagy töröttnek tűnik.
-  Az ageLOC Boost lítium-polimer akkumulátort tartalmaz, amely nem cserélhető. A robbanásveszély elkerülése végett soha ne tedd ki a készüléket hő hatásának. Ne tárold hőforrás, pl. radiátor, tűz vagy hőszigetelő közelében. A készülékkel való hajózás vagy a készülék légi szállítása előtt egyeztess az adott légitársasággal.
-  A tölthető akkumulátoroknak, mint amilyen az ageLOC Boost készülékben is található, a megfelelő működés végett minimális töltéssel kell rendelkezniük. Az akkumulátor optimális élettartamának megőrzése céljából azt javasoljuk, hogy töltsd fel a készüléket, amikor jelzi a merülést, és ne hagyd használaton kívül hónapokon keresztül.
-  Megjegyzés: az ageLOC Boost töltése indukciós töltéssel történik. Csak a mellékelt töltőt használd a töltéshez. Ne kísérelj meg a töltést más indukciós töltővel. Sérülés esetén lépj kapcsolatba a Nu Skin ügyfélszolgálatával.
-  Ne töltsd a készüléket a fürdőszobában vagy víz közelében.
-  Az ageLOC Boost készüléken ne használj erős vegyi vagy maró hatású anyagokat.
-  Ne hagyd az ageLOC Boost készüléket hosszabb ideig túlzottan meleg vagy hideg környezetben. Bent tárold.
-  A készüléket mindig hőálló, stabil, sima felületen tárold, különösen töltés közben.
-  Az ageLOC Boost készüléket kizárólag csak az utasításoknak megfelelően használd, és ne alkalmazd sérült bőrfelületen vagy kiálló anyagjegyeken. Ne használd az ageLOC Boost készüléket az előírtaknál hosszabb ideig vagy annál nagyobb rendszerességgel. Rendszeres időközönként tisztítsd meg a markolatot.

HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT


 Az ageLOC Boost készülék használata előtt, kérjük, olvasd el az összes biztonsági és technikai információt.

AZ AGELOC BOOST™ KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

Az első használat előtt teljesen töltsd fel az ageLOC Boost készüléket.


Töltés előtt győződj meg róla, hogy a készülék és a mágneses töltő is teljesen száraz.

Helyezd a készüléket a mágneses töltőre (figyelembe véve a helyes pozíciót – lásd az ábrán). Győződj meg róla, hogy a mágnesek a helyükre pattannak. Csatlakoztasd az USB-kábelt egy áramforráshoz.

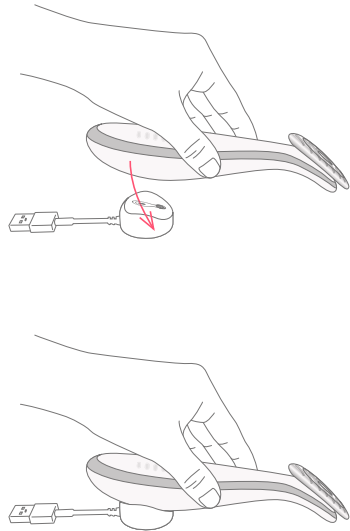

Töltsd fel teljesen az ageLOC Boost készüléket.


A töltés kezdetén az ageLOC Boost készülék egy alkalommal megrezeg, majd a LED-es sáv lassan elmozdul felfelé, jelezvén, hogy az eszköz töltés alatt áll, tájékoztatva az akkumulátor aktuális állapotáról.

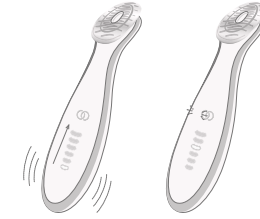

Két perc elteltével a töltésjelző sáv villogni kezd, megmutatva az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. Amikor a készülék töltése befejeződik, a villogás abbamarad, a LED-lámpák azonban továbbra is halványan világítani fognak.



Az ageLOC Boost töltése indukciós töltéssel történik. A készülék töltéséhez mindig a mellékelt töltőt használd. Ne kísérel meg a töltést más indukciós töltővel. Sérülés esetén lépj kapcsolatba a Nu Skin ügyfélszolgálatával.

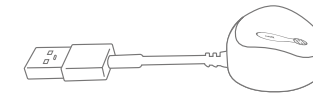

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Használd az ageLOC Boost™ készüléket a reggeli rutin részeként, közvetlenül a tisztítás és a tonizálás után.


KÉRJÜK, VEDD FIGYELEMBE: az ageLOC Boost készüléket kifejezetten az ageLOC Boost Activating Serummal történő együttes használatra terveztük. A biztonságod és a kényelem érdekében nem javasoljuk, hogy a készüléket az Activating Serumtól eltérő, bármilyen más termékkel használj.

HASZNÁLATI IDŐTARTAM


Egy használati alkalom két (2) egyperces, az arc fél oldalát érintő kezeléssből áll. Egy perc elteltével az ageLOC Boost rövid ideig szünetet tart, hogy újabb adag ageLOC Boost Activating Serumot vihess fel a kezelőfelületre, mielőtt megkezdenéd az arcod másik felének kezelését.





1. LÉPÉS Húzd végig az ujjad az érintőfelületen alulról felfelé, hogy ezáltal bekapcsold a készüléket. Ekkor kigyulladnak a fények.

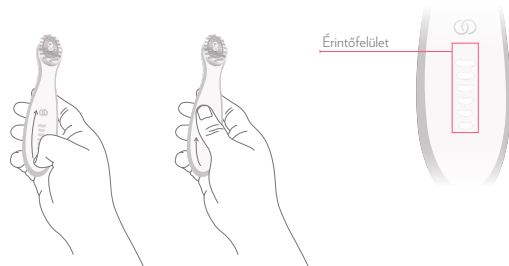

2. LÉPÉS Adagolj három cseppnyi ageLOC Boost Activating Serumot a készülék kezelőfelületére. A készülék használatával egyenletesen oszlasd el az Activating Serumot az arcod egyik felén.

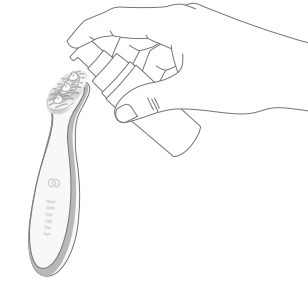


3. LÉPÉS Először is húzd végig az ujjad az érintőfelületen alulról felfelé. A készülék finoman rezegni kezd, jelezvén, hogy elkezdheted a használatát. Helyezd a kezelőfelületet az arcodra, majd lassú, felfelé és kifelé irányuló mozdulatokkal mozgasd a készüléket a bőrödön egy percig.

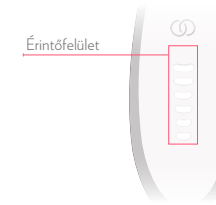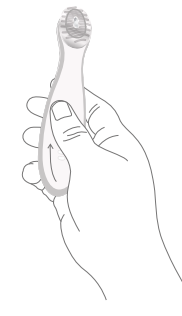


1 perc

4. LÉPÉS Az egyperces használat után a készülék automatikusan szünetet tart. Adagolj ismét három cseppnyi szérumot a készülék kezelőfelületére, majd oszlasd el egyenletesen az arcod másik felén. Húzd fel az ujjad az érintőfelületen. A készülék ismét gyengéd vibrálásba kezd. A hátralévő egy percben folytasd a lassú, felfelé és kifelé irányuló mozdulatokat.

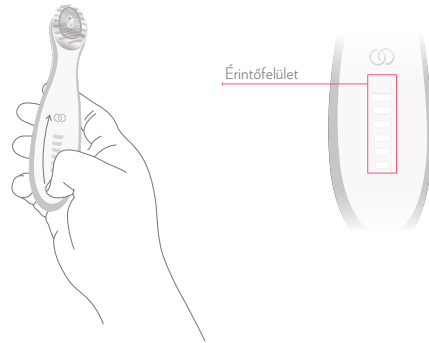


5. LÉPÉS A készülék automatikusan kikapcsol a ciklus végén. A program végeztével masszírozd be a maradék szérumot a bőrödbe, majd folytasd a napi bőrápolási rutinod következő lépésével.

A HASZNÁLAT SZÜNETELTETÉSÉHEZ Bármely pillanatban csak húzd le az ujjad az érintőfelület teljes hosszában. A folytatáshoz húzd fel az ujjad az érintőfelületen.

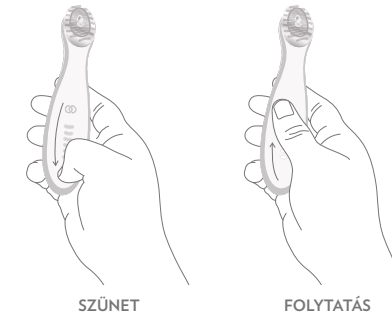


A MŰKÖDÉS MANUÁLIS LEÁLLÍTÁSÁHOZ Húzd lefelé az ujjad kétszer egymás után az érintőfelület teljes hosszában, és a készülék használat közben bármikor leáll.

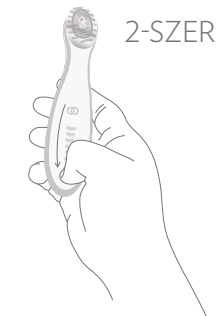

KÉRJÜK, VEDD FIGYELEMBE: az ageLOC Boost eszközt arra terveztük, hogy finoman ide-oda csúszkáljon a bőr felületén, így nem szabad egy helyben tartani. Amennyiben bőrödön hosszan tartó kipirosodás vagy abnormalis irritáció jelentkezik, azonnal hagyd abba a készülék használatát, és szükség esetén fordulj orvoshoz.

AZ AGELOC BOOST KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Az ageLOC Boost készüléket minden egyes használat után meg kell tisztítani az alábbi utasításoknak megfelelően, hogy elkerülhető legyen a maradék szérum felhalmozódása. Minden használat után folyó víz alatt mosd meg az ageLOC Boost kezelőfelületét, hogy a réseiből eltávolítsd a szennyeződést és a visszamaradt szérumot. Egy törölközővel alaposan töröld szárazra a készüléket. Tárdol száraz helyen.

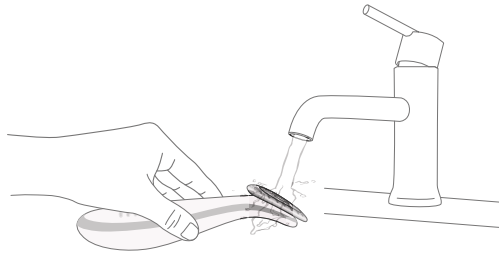

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A VEZETŐKÉPESSÉG ELVESZTÉSE HASZNÁLAT KÖZBEN: amennyiben a készülék átmenetileg elveszti a mikroáramú vezetőképességét, a termék LED-lámpái öt alkalommal felvillannak, öt erős rezgés kíséretében. Ha ez megtörténik, kenj még több ageLOC Boost Activating Serumot a készülék kezelőfelületére. Húzd felfelé az ujjadat az érintőfelületen a használat folytatásához.

A KÉSZÜLÉK NEM REAGÁL: lassan húzd végig az ujjadat alulról felfelé az érintőfelület teljes hosszában. Ha a készülék továbbra sem reagál, töltsd fel teljesen, majd próbáld újra. Abban az esetben, ha a készülék ezek után sem reagál, vedd fel a kapcsolatot a Nu Skin ügyfélszolgálatával.

ALACSONY AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSEGI SZINT: a készülék alján látható lámpa borostyánszínűre vált. Töltsd fel a készüléket.

RENDKÍVÜL ALACSONY AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSEGI SZINT: az ageLOC Boost alján látható, borostyánszínben világító lámpa villogni kezd, amikor a felhasználó megkezdéné a használatot. Ez azt jelzi, hogy nincs elegendő töltés az akkumulátorban a használatához, így a készülék ki fog kapcsolni. Töltsd fel a készüléket.

A KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉSE

Az ageLOC Boost készüléket a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell leselejtezni. Az ageLOC Boost készülék elektronikus alkatrészeket és lítium-polimer akkumulátort tartalmaz, melyek a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítandók. Amikor az ageLOC Boost készülék élettartama véget ér, fordulj a helyi hulladékgazdálkodási osztályhoz, hogy megismerhesd a megfelelő ártalmatlanítási és újrafeldolgozási lehetőségeket.



Az akkumulátort a saját régiódnak megfelelő módon ártalmatlanítsd

KARBANTARTÁS

Ne kísérelj meg a készülék saját kezű javítását. Ezáltal elveszítheted a jótállást. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Sérült készüléket ne szállíts repülőn.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

ageLOC Boost

Maximális kimenet:


5 V, 250 μ A, 0,414 Hz

 IP25

 Kizárólag az ageLOC Boost Magnetic Charger mágneses töltővel töltsd.

Ha megsérül a készülék, lépj kapcsolatba a Nu Skin ügyfélszolgálatával.

ageLOC Boost Magnetic Charger (mágneses töltő)

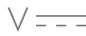Bemenet: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromágneses kompatibilitás: megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelv előírásainak

Biztonság: megfelel a 2014/35/EU kisfeszültségi irányelv előírásainak

A készülék súlya az akkumulátorral együtt: 69,5 g






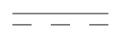
KARBANTARTÁS, A CSERE ÉS A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI

KORLÁTOZOTT KÉTÉVES JÓTÁLLÁS: a Nu Skin® szavatosságot vállal arra, hogy a készülék az ügyfél részére történő kiszállítás időpontjától kezdődően két éven át anyag- és megmunkálásbeli hibáktól mentes. Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból vagy balesetből eredő termékkárookra. Ha a termék a kétéves szavatossági idő alatt elromlik, kérjük, javítás vagy csere érdekében hívd fel a helyi Nu Skin® ügyfélszolgálatot. Előfordulhat, hogy ehhez be kell mutatnod a hivatalos vásárlási bizonylatot, melyen szerepel a kiszállítási dátum. A Nu Skin® fenntartja magának a jogot a készülék átvizsgálására. Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlás országában érvényes jogszabályokban rögzített jogokat, ezen jogok védelem alatt állnak. Ez a jótállás a következő országokban érvényes: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Izrael, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Ukrajna.

SZABADALMAK

Számos amerikai és nemzetközi szabadalom is függőben van.

SZIMBÓLUMOK MEGHATÁROZÁSAI

Szimbólum	Definíció
	Figyelmeztetés
	Lapozd fel a használati útmutatót
	Az akkumulátort a saját régiódnak megfelelő módon ártalmatlanítsd
	III. érintésvédelmi osztályú készülék földetlenn törpefeszültségű (SELV) áramforrásból táplálva
	Csak a meghatározott töltővel töltsd
	Egyenáram



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgium

Importáljja/Импортер/Импортер:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ню Скін Энтерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.

Kínában készült

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021