



ageLOC®



 ageLOC®

**GALVANIC SPA® \***

取扱説明書

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## ageLOC® ガルバニック スパ® \*

プロの技を自宅で簡単に。  
なめらかでハリ感のある理想的な肌へ。

ガルバニック スパ®は、ガルバニック電流により、  
各種ケア用製品の成分を肌に届けるよう設計された、  
ニュー スキンの代表的な美容機器です。

コンダクターを付け変えるだけで、フェイス ケア、  
スカルプ ケア、ボディ ケアが1台で行えます。

1つの部位に最長5分の簡単ケアで、  
なめらかでハリ感のある理想的な肌へと導きます。

# 目次

ご使用の前に：安全上のご注意	4
セットに含まれているもの	6
各部の名称	8
ディスプレイ表示	9
基本的な使用方法	10
フェイスケア（トリートメント番号1&2） ガルバニックスパ <sup>TM</sup> * フェイシャルジェル	13
スポットケア（トリートメント番号3） トゥルーフェイスペプタイドジェル	16
ボディケア（トリートメント番号4） ガルバニックボディジェル	18
スカルプケア（トリートメント番号5） ニュートリオールスカルプ & ヘアーセラム	20
フェイスケア（トリートメント番号5） ガルバニックスパ <sup>®</sup> * パワーチャージマスク <sup>TM</sup>	22
本体・コンダクターのお手入れ方法、電池の交換方法	24
仕様・その他	26
ageLOC ガルバニックスパ <sup>*</sup> の保証書	27

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## ご使用の前に

ageLOC ガルバニック スパ\*を使用される前に、以下の使用上の注意事項を必ずお読みください。

### 安全上のご注意

- ◆ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するものです。
- ◆注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



警告 使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



注意 人が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合。



この記号は、禁止行為(してはいけないこと)を示します。具体的な注意内容は⊘の中や近くに文章や絵で示しています。



この記号は、強制(必ず守ること)を示します。



警告

- ⊘ 次のような方または部位には、使用しないでください。  
(使用を希望される場合は、使用前に必ず医師に相談してください)
  - ペースメーカー等医療用電気機器を装着されている方
  - 心臓に疾患がある方
  - 医師の治療を受けている方
  - 妊娠中の方
  - その他体調のすぐれない方
  - 癲癇の方
  - 体内に金属を入れている方
  - 皮膚に異常がある方
  - アトピー性皮膚炎の方や、アレルギー体質(金属アレルギーを含む)で特にお肌が敏感な方
  - 化粧品による皮膚炎を起こしている方
  - 過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている方
  - ニキビが化膿し(黄ニキビ)、炎症を起こしている方
  - 痛覚・知覚に障害のある方
- ⊘ 心臓の上や、陰部、粘膜、皮膚疾患のある部位などには使用しないでください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- ⊘ 治癒効果等を期待して医療機器的な使用はしないでください。
- ⊘ 本体の分解・改造は行わないでください。
- ⊘ 本製品を指定のトリートメント以外の目的には使用しないでください。
- ⊘ 本体は絶対に水洗いしないでください。  
また、水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ⊘ 入浴時の使用はおやめください。
- ⊘ 本体のお手入れの際には、必ず電源を「OFF」にしてください。



注意

- ⊘ 本製品は肌の洗浄・保湿効果を高める目的以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品の使用中に皮膚にかぶれが生じたり、身体に異常を感じたりした場合は、使用を直ちに中止し必要に応じて医師に相談してください。
- ❗ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ❗ 本体を高い所から落とさないでください。故障の原因になります。
- ❗ 液晶画面に過度な刺激を加えたり、傷をつけないようにしてください。液晶画面故障の原因になります。
- ❗ お手入れをするときは、シンナー、ベンジン、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ❗ 使用後は、湿らせたタオル等で、ジェル等の汚れをしっかりと落とし、湿気を乾かしてから保管してください。カビやサビの原因になります。
- ❗ 本体は4℃以上の場所で保管してください。
- ⊘ 電池の取り扱いについては、次の事項を必ず守ってください。
  - 電池のプラスとマイナスの向きを表示どおりに正しくセットしてください。
  - 古い電池や種類の違う電池を使用しないでください。
  - 液もれが起こった場合は、本体についた液をよく拭き取り、新しい電池に交換してください。
  - 使用済みの電池は、指定の場所に廃棄してください。
  - 電池を火中に投入しないでください。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## セットに含まれているもの

- 1 取扱説明書
- 2 ageLOC ガルバニック スパ\* 本体
- 3 クイックガイド
- 4 フェイス コンダクター
- 5 スポット コンダクター
- 6 ボディ コンダクター
- 7 スカルプ コンダクター
- 8 単4形乾電池 2本



3




## ageLOC® ガルバニック スパ® クイックガイド

プロの技を自宅で簡単に、なめらかでハリ感のある理想的な肌へと導きます。

ガルバニックスパでのお手入れに適切なコンタクターと使用製品を下表を参考に選びください。

使用製品	コンタクター	トリートメント箇所	使用方法
ageLOC スパ® フェイスナル ジェル * 付属のジェルで、すみずみまで塗布し、	フェイスコンタクター	プリトリートメント ジェル 1 トリートメント ジェル 2	プリトリートメント ジェルとトリートメント ジェルの2ステップ、順に2回を各部位にご使用ください。
トローラーフェイスベアアイト ジェル 色の唇や口の周り、目の周りに当たる 部分にうるおいとハリをもたえる美容液。	スロットコンタクター	3	気になる部分全体で3回順にトリートメント。解凍2回を各部位にご使用ください。
ageLOC ボディジェル ハリのあるさらさらな肌へ整えるボディ ジェル。	ボディコンタクター	4	二の腕、太もも、ヒップ、足ももの1つ の部位に対して、5分間のトリート メントをおこなう。適に目を移動し1部位を1日1回 までにご使用ください。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

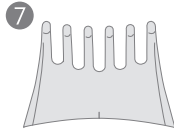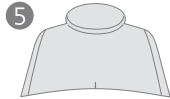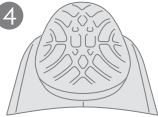


8



ageLOC ガルバニック スパ®でのトリートメントに必要な製  
品は、別売りです。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## 各部の名称

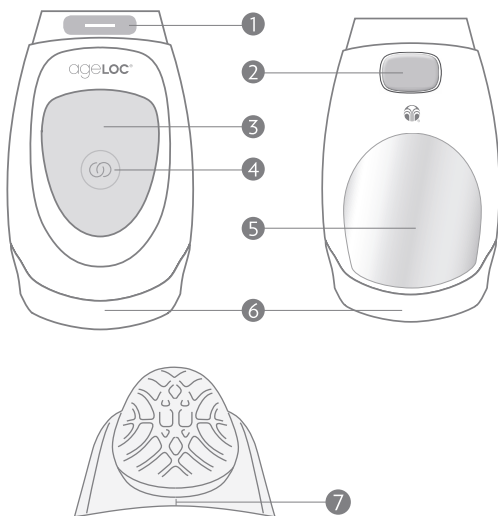


- ① コンダクター装着部
- ② コンダクター取り外しボタン
- ③ ディスプレイ
- ④ 操作ボタン
- ⑤ クローム持ち手部分
- ⑥ 電池カバー
- ⑦ コンダクター位置マーク



ご使用前に、本体保護フィルムを外してから使用してください。



## ディスプレイ表示

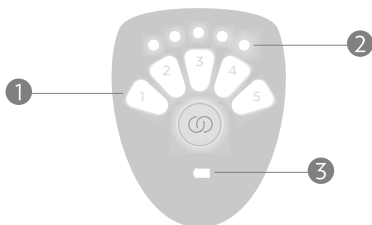

- 1** 1～5の番号は、トリートメント番号を示しています。  
各製品は、正しいトリートメント番号に合わせて使用してください。

<b>1</b>	ガルバニック スパ®* フェイシャル プリトリート ジェル	<b>4</b>	ガルバニック ボディ ジェル
<b>2</b>	ガルバニック スパ®* フェイシャルトリートメント ジェル	<b>5</b>	ニュートリオール スカルプ & ヘア セラム
<b>3</b>	トゥルー フェイス ペプチド ジェル	<b>5</b>	ガルバニック スパ®* パワーチャージ マスク®

- 2** 5つのドットは、該当するトリートメントの所要時間を表しています。
- 3** 電池残量が少なくなると表示されます。  
電池残量が少ない場合、電源を入れるたびにディスプレイ下部にオレンジ色の電池マークが表示されて電子音が鳴ります。電池残量が完全に切れるとディスプレイ下部にオレンジ色の電池マークが表示されたあと、電源が切れます。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## 基本的な使用方法

ageLOC ガルバニック スパ\*には、顔用、頭皮用、ボディ用の異なるコンダクターがありますが、すべて同じような使用方法です。トリートメントを始める前に、各トリートメント方法(本冊子 P.13～23)をお読みください。

トリートメントごとに、適切なコンダクターを本体に取り付けてください。トリートメントをする肌とクローム持ち手部分に触れる手を湿らせてから、トリートメントをしてください。

### コンダクターの取り付け方

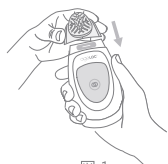


図 1

図1の向きで本体を持ち、コンダクターの位置マークを本体の正面に合わせ、コンダクターの両側面を持ってカチッと音がするまで本体に差し込みます(図1)。本体に差し込めない場合は、コンダクターの向きと位置が正しくない可能性があるため確認してください。コンダクターが本体に正しく装着されていないと作動しません。



注意

故障等の原因になるため、コンダクターを無理に押し込まないでください。

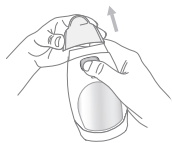


図 2

### コンダクターの取り外し方

図2の向きで本体を持ち、空いた手でコンダクターの側面を持ちます。取り外しボタンをしっかりと押し、本体から優しく取り外します(図2)。

## ディスプレイの点灯

本体の電源が入っているときに、点灯します（肌から離れたり、肌や手が十分湿っていないと点滅し、トリートメントが中断されます）。

## 製品を塗布

顔、頭皮、またはボディのトリートメントを行いたい部位に、必要な製品をたっぷり塗布します。

## トリートメント番号を選択

図3のように、操作ボタンを押し、適切なトリートメント番号を選択します（図3）。



図 3

## ガルバニック電流を作動

トリートメントを開始するには、肌や手がコンダクターと本体背面にあるクローム持ち手部分の両方に触れていなければなりません。ガルバニック電流が確実に流れるよう、トリートメントをする肌とクローム持ち手部分に触れる手を湿らせてから、トリートメントをしてください。トリートメント中にクローム持ち手部分から指が離れた場合は、本体を持ち直してトリートメントを再開してください。

## トリートメント中

作動中は、10秒ごとに電子音が鳴ります。トリートメントの残り時間が30秒になると、トリートメントが完了するまで5秒ごとに電子音が鳴ります。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## トリートメントの中断

トリートメント中の肌とクローム持ち手部分に触れる手が湿っていなければなりません(図4)。トリートメント中に、コンダクターが肌から離れたり、クローム持ち手部分から手が離れるとディスプレイが点滅します。さらに数分間使用がないと自動的に電源が切れます。



図 4

## トリートメント完了

トリートメントが完了すると、「ピー、ピピッ」と電子音が鳴り、自動的に電源が切れます。別の部位のトリートメントを行いたい場合は、操作ボタンを押してトリートメントを開始できます。操作ボタンを長押しすると、電源を切ることができます。



注意

肌に腫れや赤みなどがあらわれた場合は使用を中止してください。

# フェイスケア



プリトリート ジェル



トリートメント ジェル

ガルバニックスパ\* フェイシャル ジェルを使用して、フェイスケアを行います。

トリートメント番号		コンダクター
プリトリート ジェル 1 2分	トリートメント ジェル 2 3分	
週 2回		



図 1

## 準備

洗顔後にご使用ください。フェイス コンダクターを本体に取り付けます(図1)。

## ステップ 1

目の周りやまぶた、唇を避け、プリトリートジェル1本分を顔全体になじませます。



図 2

## ステップ 2

ディスプレイにトリートメント番号「1」が点灯するまで操作ボタンを押します(図2)。このトリートメントの所要時間は2分です。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

### ステップ3



図3

モイスチャー ミストまたは水でよく湿らせた手で、本体背面にあるクローム持ち手部分に触れるように本体を持ちます。プリトリート ジェルをつけた部位にコンダクターを当てると、1~3回電子音が鳴り、肌状態に合った電流の強さに自動的にセットされます。その後、肌の上でゆっくりと動かしてください（図3）。目の周りやまぶた、唇等の敏感な部位は避けてください。

トリートメント中は、10秒ごとに電子音が鳴り、残り時間が30秒になると5秒ごとに電子音が鳴ります。

### ステップ4

トリートメントが完了すると「ピー、ピピッ」と電子音が鳴り、自動的に電源が切れます。トリートメント終了後、肌に残ったプリトリートジェルは洗い流してください。また、本体とフェイス コンダクターに残ったジェルは、湿ったタオルでふき取ってください（図4）。



図4

### ステップ5

目の周り、まぶた、唇を避け、トリートメント ジェル1本分を顔全体になじませます。

### ステップ6

トリートメント番号「2」が点灯するまで操作ボタンを押します（図5）。このトリートメントの所要時間は3分です。



図5

## ステップ7

再び、湿った手で、本体背面にあるクローム持ち手部分に触れるように本体を持ちます。トリートメント ジェルをつけた部位にコンダクターを当てると、1~3回電子音が鳴り、肌状態に合った電流の強さに自動的にセットされます。その後、肌の上でゆっくりと動かしてください(図6)。目の周りやまぶた、唇等の敏感な部位は避けてください。



図 6

トリートメント中は、10秒ごとに電子音が鳴り、残り時間が30秒になると5秒ごとに電子音が鳴ります。

## ステップ8

トリートメントが完了すると「ピー、ピピッ」と電子音が鳴り、自動的に電源が切れます。肌に残ったトリートメント ジェルは洗い流すか、肌に負担がかからないよう、十分に湿ったタオルでふき残しが無いようふき取ってください。その後は、肌の状態に合わせて、化粧水、乳液、クリームなどをお使いください。本体やコンダクターに残ったジェルは湿ったタオルでふき取ってください(図7)。



図 7



ヒント

ネック & デコルテのトリートメントはボディコンダクターを使用して、ガルバニック スパ\* フェイシャル ジェルで行います。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## スポット ケア



トゥルー フェイス ペプチイド ジェルを使用して、目の周りや口の周り、額などの気になる部分にスポット ケアを行います。


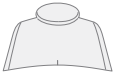
トリートメント番号	コンダクター
 5分	
朝晩 2回	



図 1

### 準備

洗顔後、化粧水で整えた肌にご使用ください。スポット コンダクターを本体に取り付けます(図 1)。

### ステップ 1

目の周りや口の周り、額などの気になる部分にトゥルー フェイス ペプチイド ジェルをなじませます。



図 2

### ステップ 2

ディスプレイにトリートメント番号「3」が点灯するまで操作ボタンを押します(図 2)。このトリートメントの所要時間は5分です。



ヒント

トリートメント時間の5分は、顔全体をトリートメントする場合の推奨時間です。目もとなど、敏感な部位は短くても構いません。



### ステップ 3



図 3

モイスチャー ミストまたは水でよく湿らせた手で、本体背面にあるクローム持ち手部分に触れるように本体を持ちます。トゥルー フェイス ペプタイド ジェルをつけた部位にコンダクターを当てると、1~3回電子音が鳴り、肌状態に合った電流の強さに自動的にセットされます。その後、肌の上でゆっくりと動かしてください(図3)。まぶたや唇等の敏感な部位は避けてください。

トリートメント中は、10秒ごとに電子音が鳴り、残り時間が30秒になると5秒ごとに電子音が鳴ります。

### ステップ 4

トリートメントが完了すると「ピー、ピッ」と電子音が鳴り、自動的に電源が切れます。肌に残ったジェルは、そのままなじませてください。本体やコンダクターに残ったジェルは湿ったタオルでふき取ってください(図4)。



図 4

## ボディ ケア



ガルバニック ボディ ジェルを使用して、太ももなどのボディ ケアを行います。



トリートメント番号	コンダクター
 4 5分	
週 3回	



図 1

### 準備

ボディ コンダクターを本体に取り付けます (図1)。

### ステップ 1

清潔な肌にご使用ください。トリートメントを行いたい部位にガルバニック ボディ ジェルをなじませます。



図 2

### ステップ 2

ディスプレイにトリートメント番号「4」が点灯するまで操作ボタンを押します (図2)。このトリートメントの所要時間は5分です。



ヒント

1つの部位に対して5分間のトリートメントをおすすめします。ただし、部位によっては、必ずしも5分間行う必要はありません。



図 3

### ステップ 3

モイスチャー ミストまたは水でよく湿らせた手で、本体背面にあるクローム持ち手部分に触れるように本体を持ちます。ガルバニックボディジェルをつけた部位にコンダクターを当てると、1～3回電子音が鳴り、肌状態に合った電流の強さに自動的にセットされます。その後、肌の上でゆっくりと動かしてください(図3)。

トリートメント中は、10秒ごとに電子音が鳴り、残り時間が30秒になると5秒ごとに電子音が鳴ります。

### ステップ 4

トリートメントが完了すると「ピー、ピッ」と電子音が鳴り、自動的に電源が切れます。トリートメントを行いたい各部位に対してステップ1～3を行います。肌に残ったジェルは洗い流すか、肌に負担がかからないよう、十分に湿ったタオルでふき残しがないようふき取ってください。その後は、ダーマティック エフェクツの使用をおすすめします。本体やコンダクターに残ったジェルは湿ったタオルでふき取ってください(図4)。



図 4

ボディケアを重点的にやりたい方は、ボディ専用の美容機器「ガルバニック ボディ スパ\*」(別売)の使用をおすすめします。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## スカルプケア



ニュートリオール スカルプ & ヘアーセラムを使用し、頭皮のスカルプケアを行います。


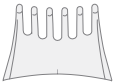
トリートメント番号	コンダクター
 2分	
朝晩 2回	



図 1

### 準備

洗髪後タオルで乾かした髪または乾いた髪に使用します。スカルプ コンダクターを本体に取り付けます(図1)。



図 2

### ステップ 1

髪を分け、ニュートリオール スカルプ & ヘアーセラムを頭皮に直接吹きかけます(図2)。



ヒント

髪が乾いている場合は、ニュートリオール スカルプ & ヘアーセラムの前に少量の水を吹きかけておくと、指どおりがよくなりトリートメントしやすくなります。



図 3



図 4

## ステップ 2

ニュートリオール スカルプ & ヘアセラムを頭皮に優しく揉み込みます(図3)。髪が乱れた場合はクシでとがして整えます(図4)。

ディスプレイにトリートメント番号「5」が表示されるまで操作ボタンを押します(図5)。このトリートメントの所要時間は2分です。



図 5

## ステップ 3

モイスチャー ミストまたは水でよく湿らせた手で、本体背面にあるクローム持ち手部分に触れるように本体を持ちます。ニュートリオール スカルプ & ヘアセラムをつけた部位にコンダクターを当てると、1~3回電子音が鳴り、肌状態に合った電流の強さに自動的にセットされます。その後、頭皮の上でゆっくりと動かしてください。コンダクターを頭皮から離さずに生え際から後ろへ動かします(図6)。



図 6

トリートメント中は、10秒ごとに電子音が鳴り、残り時間が30秒になると5秒ごとに電子音が鳴ります。

## ステップ 4

トリートメントが完了すると「ピー、ピピッ」と電子音が鳴り、自動的に電源が切れます。髪は洗い流さず、いつもどおりにスタイリングしてください。本体やコンダクターに残った製品は湿ったタオルでふき取ってください(図7)。

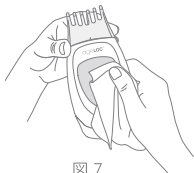




図 7

## フェイスケア



ガルバニックスパ\* パワーチャージ マスクを使用して、ラグジュアリーなフェイスケアを行います。

トリートメント番号	コンダクター
 5 2分	
週 1回	

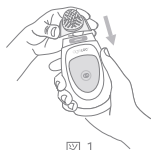


図 1

### 準備

洗顔後、化粧水で整えた肌にご使用ください。フェイスコンダクターを本体に取り付けます(図1)。

### ステップ 1

このガルバニックスパ\* パワーチャージ マスクは2枚のシートに挟まれた半透明のマスクです。袋から取り出しゆっくりと広げ、片方のシートだけはがします(図2)。シートをはずしてあらわれた半透明の面が肌に触れるよう、顔にのせます(図3)。残った反対側のシートをはずし(図4)、マスクと顔の間に空気が入らないよう密着させます(図5)。



図 2



図 3



図 4



図 5



図 6

## ステップ 2

ディスプレイにトリートメント番号「5」が点灯するまで操作ボタンを押します(図6)。このトリートメントの所要時間は2分です。



ヒント

しっかりトリートメントをしたい場合は「4」を選択してください。「4」のトリートメントの所要時間は5分です。

## ステップ 3

モイスチャー ミストまたは水でよく湿らせた手で、本体背面にあるクローム持ち手部分に触れるように本体を持ちます。マスクの上にコンダクターを当てると、1~3回電子音が鳴り、肌状態に合った電流の強さに自動的にセットされます。その後、マスクの上からやさしくゆっくりとコンダクターを滑らせます(図7)。



図 7

トリートメント中は、10秒ごとに電子音が鳴り、残り時間が30秒になると5秒ごとに電子音が鳴ります。

## ステップ 4

トリートメントが完了すると「ピー、ピピッ」と電子音が鳴り、自動的に電源が切れます。本体やコンダクターに残った美容液は湿ったタオルでふき取ってください(図8)。



図 8

## ステップ 5

トリートメント後はマスクをのせたまま、10~15分程度リラックスします。

## ステップ 6

マスクをはずし、残っている美容液を肌に優しくなじませたあと、いつものお手入れを行います。

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。

## 本体・コンダクターのお手入れ方法、 電池の交換方法

### 本体およびコンダクターのお手入れ



図 1

トリートメント終了後はコンダクターを本体から取り外し、それぞれお手入れします。本体に残った製品を湿ったタオルで拭き取ってください(図1)。本体を十分に乾燥させ、コンダクターを取り外した状態で乾燥した場所に保管してください。コンダクターに残った製品を洗い流し、十分乾かしてください。

### 電池の交換方法



図 2

電池の残量が少なくなると、図2のように、ディスプレイ中央にオレンジ色の電池アイコンが表示され、「ピピピピ、ピピピピ」と電子音が鳴ります。この表示が出たら新しい単4形電池2本に取り換えてください。

電池を取り換えるには、まず電池収納部カバーの両側を持って(図3)強く下に引きます(図4)。



図 3



図 4



リボンを優しく引っぱり電池を取り外します。新しい単4形電池の(+)(-)の向きを確認しながら、リボンが電池の下になるよう(図5)に電池を奥へ押し込みます。



図 5



図 6

最後に、電池カバーをしっかりと閉じてください(図6)。



注意

新しい電池を入れる際には、必ずリボンを電池の下にして取り付けてください(図5)。

## 仕様・その他

品名	ageLOC® ガルバニック スパ®*
分類	美容機器
使用電池種類	単4形乾電池×2本
輸入発売元	ニュースキンジャパン株式会社 東京都港区虎ノ門1-3-1 TEL:0120-200-449

### (1)保証書

- 保証書は、必ず「ブランド メンバー(販売員) 名・お買い上げ日」等の記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている期間・条件のもと、無料保証をお約束するものです(電池は消耗品のため、除外)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、ご不明な点がある場合にはお求めの販売員へお問い合わせください。

保証期間(お買い上げ日から2年間です)

### (2)保証期間中に不具合が生じた場合

お求めの販売員へ保証書を添えて製品をお渡してください。

### (3)保証期間中の不具合とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お求めの販売員へお問い合わせください。

## ageLOC®ガルバニック スパ®\*の保証書

本書は、お買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により保証を行うことをお約束するものです。下記保証中に故障が発生した場合は、ニュー スキン ジャパン 株式会社(TEL:0120-200-449)にお問い合わせください。

製 品 名 ageLOC® ガルバニック スパ®\*

保 証 期 間 本体お買い上げ日より2年間

お買い上げ日(\*注)

年 月 日

お 名 前

電 話 番 号

ブランドメンバー番号

ブランドメンバー名

### 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、ニュー スキン ジャパン 株式会社が無料保証します。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日(\*注)、お客様名、ブランドメンバー(販売員)名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 誤った使用方法、または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害による故障および損傷。
  - 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
  - 消耗品交換(電池)
  - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

(\*注)ブランドメンバーのお買い上げ日は、現金領収書およびカード利用明細書もしくは納品書、お客様お買い上げ日は製品購入契約書(領収書)の日付となります。これらの書類はお買い上げ日を証明するものになりますので、併せて保管してください。

ニュー スキン ジャパン 株式会社  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア14階  
TEL:0120-200-449

\*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉などの意味はありません。



ニユースキンジヤパン株式会社 [www.nuskin.co.jp](http://www.nuskin.co.jp)  
東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア14階 TEL:03-6626-1234(代)  
本誌に掲載されているすべてのものに関して、無断転載・複製を禁じます。

©2020Nu Skin Enterprises, Inc. Nu Skin Japan Co.Ltd. NSE Products, Inc. 94510884/2Printed in the U.S.A.